

MEDiX



POLYRAD

Premium

z sufitowym zawieszeniem lampy RTG


Wygoda i efektywność

Obrazowanie analogowe lub cyfrowe

POLYRAD PREMIUM stanowi rodzinę systemów radiograficznych z cyfrową lub analogową detekcją obrazu.

Zalety klasycznej konstrukcji


Wypożyczenie systemu w generator RTG wysokiej częstotliwości, mobilny lub stacjonarny stół radiograficzny oraz statyw do zdjęć odległościowych sprawia, że POLYRAD PREMIUM znajduje zastosowanie w badaniach klatki piersiowej, układu mięśniowo-szkieletowego, jamy brzusznej, w badaniach urologicznych. Sufitowa kolumna lampy RTG znacznie ułatwia wykonywanie badań pacjentom na łóżkach i wózkach transportowych. Konstrukcja systemu stwarza możliwość wyboru urządzenia wyposażonego w jeden bądź w dwa detektory.

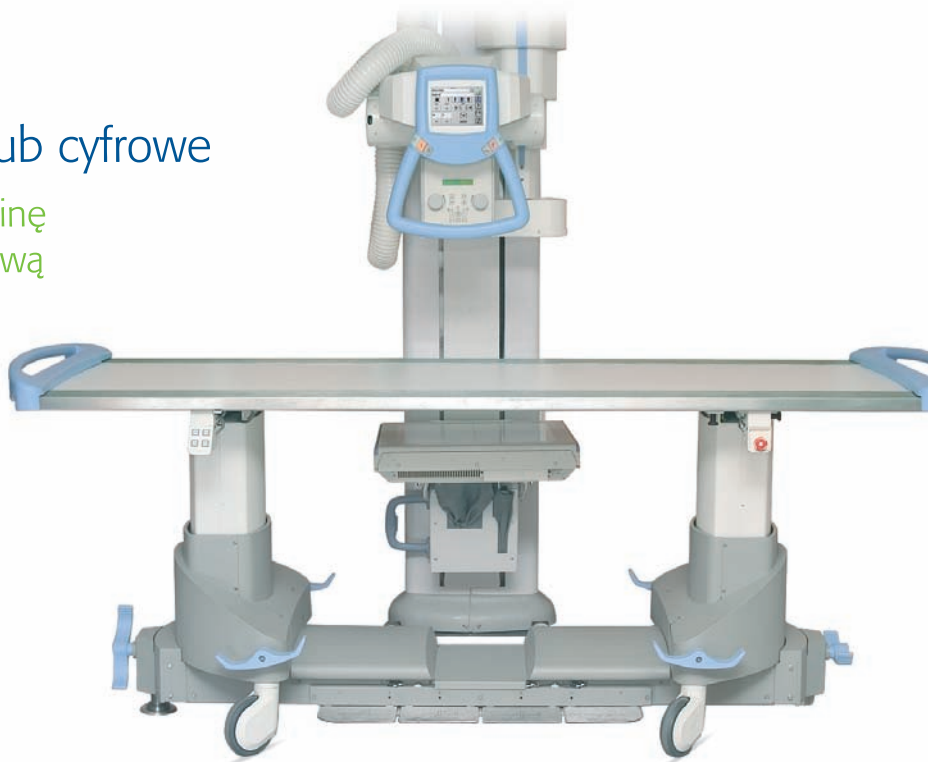

Pozycjonowanie dostosowane do potrzeb

Manualne

- lampa RTG, panel statywu i blat stołu ustawiane ręcznie
 - pionowy ruch lampy wspomagany elektrycznie
- Z nadążnością ruchów
- automatyczne ustawianie się detektora w osi lampy
 - samoczynny ruch lampy za środkiem detektora

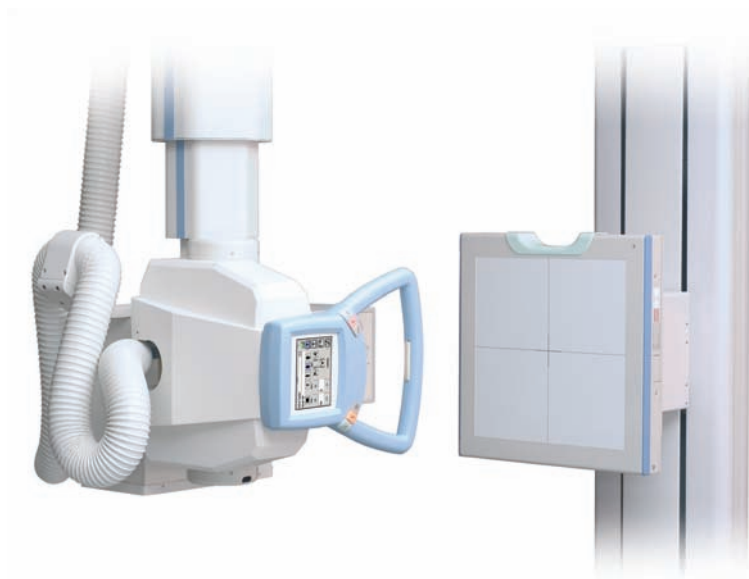

Autopozycjonowanie

- automatyczne ustawianie do uprzednio zaprogramowanej pozycji lub pozycjonowanie z konsoli "na żądanie" operatora
- automatyczne przyjmowanie przez lampę i detektor pozycji wyjściowych właściwych dla danego rodzaju badania
- wybór rodzaju badania z konsoli generatora lub z dodatkowego panelu umieszczanego na obudowie lampy RTG




Mobilny stół do zastosowań stacjonarnych

Specjalna konstrukcja mobilnego stołu pacjenta pozwala na jego stabilne unieruchomienie w pozycji zdjęciowej. Zakres motorowej regulacji wysokości blatu wynosi 40 cm. Stół wyposażony jest w pływający blat wykonany z włókna węglowego.



Szerokie możliwości konfiguracyjne, system autopozycjonowania, system ruchów nadążnych, cyfrowy system akwizycji obrazów (DR) sprawiają, że POLYRAD PREMIUM to idealne rozwiązanie dla wszystkich ceniących wygodę i efektywność.

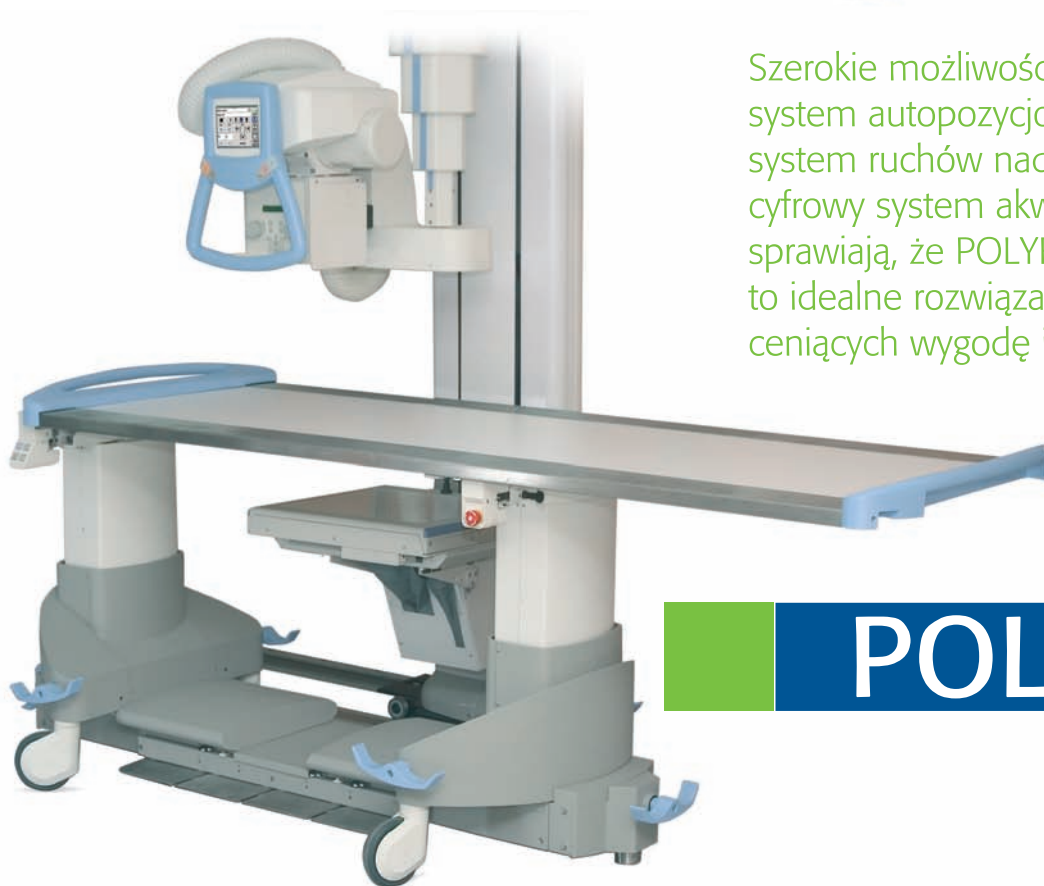


POLYRAD

Premium

POLYRAD

Premium

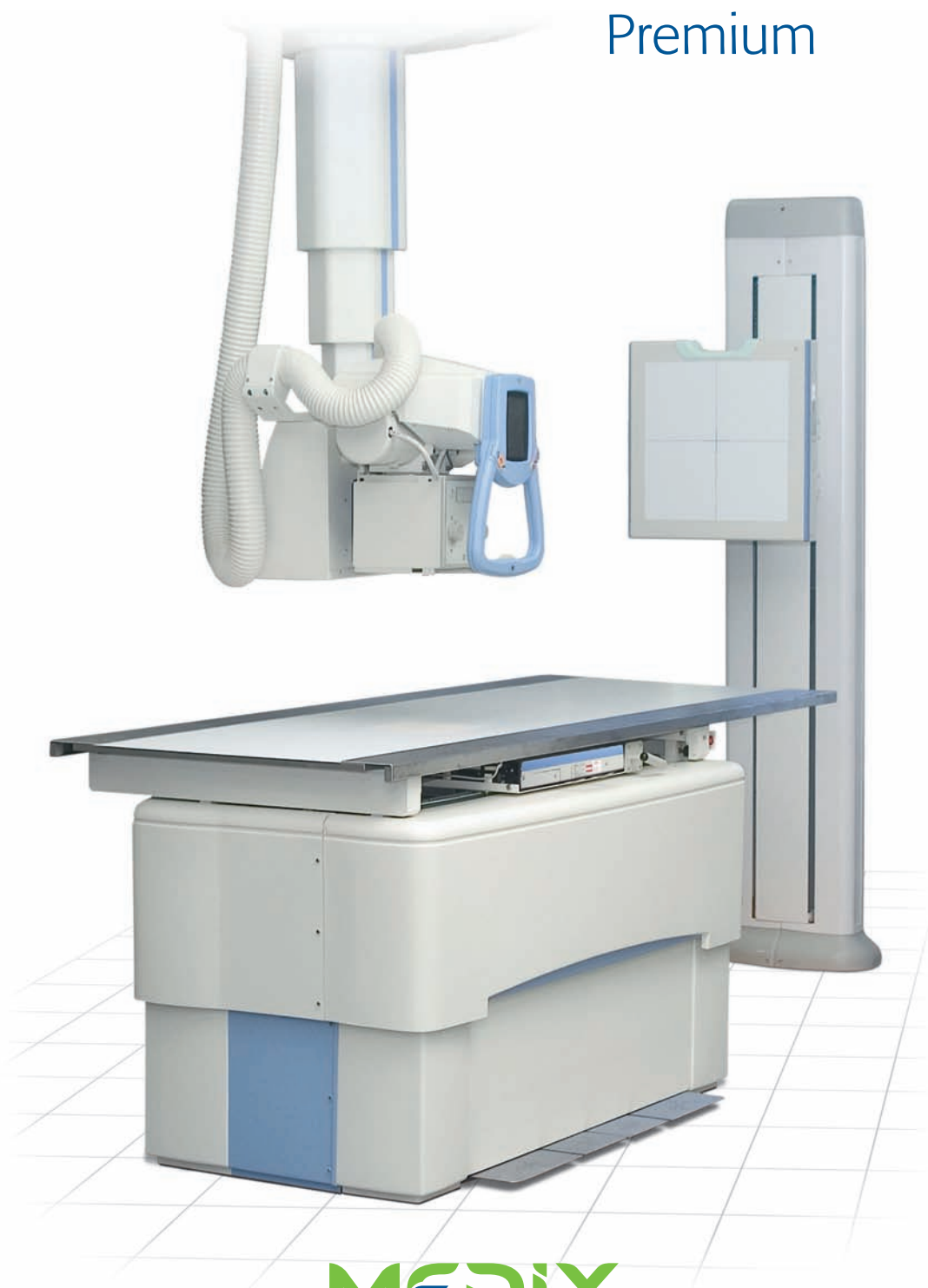

MEDIX

ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa

tel. 22 516 98 60

fax 22 610 37 77

info@medix.com.pl

www.medix.com.pl