



CZYM JEST SONDA PROVU?

Wideo-sonda ProVu to urządzenie intubacyjne nowej generacji, łączące w sobie nowoczesną technologię wizualizacyjną z unikalnym systemem wprowadzania rurki dotchawicznej (ETT), idealne do wszystkich rodzajów intubacji.

- Urządzenia sterylne, jednorazowego użytku.
- Automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji.
- Miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania.
- Obrotowa złączka USB.
- Wyjmowany w całości, giętki przewódnik.



DOWOLNY KSZTAŁT ANATOMICZNY



- Możliwość regulacji kształtu sondy w trudnych do zaintubowania drogach oddechowych.
- Wyjmowany giętki przewódnik zapewniający dodatkową elastyczność. Jest to przydatne w przypadku:
 - intubacji dotchawicznej przez nos,
 - intubacji z użyciem maski krtaniowej.
- Ograniczenie urazów tchawicy dzięki elastyczności umożliwiającej wprowadzanie rurki intubacyjnej pośrodku światła dróg oddechowych podczas przechodzenia przez ostrogę tchawicy.

PRECYZYJNE UMIEJSCOWIENIE RURKI INTUBACYJNEJ

- Brak konieczności wykonywania zdjęcia Rtg w celu potwierdzenia umiejscowienia rurki intubacyjnej - innowcyjna wizualizacja wideo sondy ProVu ukazuje przechodzenie rurki intubacyjnej przez wszystkie odcinki dróg oddechowych do ostrogi tchawicy.
- Brak ryzyka przypadkowej intubacji żołądka - przez cały czas użytkownik widzi dokładnie, gdzie znajduje się końcówka rurki intubacyjnej.



SZYBKIE ZAŁOŻENIE RURKI INTUBACYJNEJ



- Stereowanie kierunkowe przy pomocy miękkiego kółka sterującego.
- Manewrowalna końcówka pomaga w nawigowaniu przez drogi oddechowe - ruch w zakresie 95 stopni.
- Miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu tchawicy lub strun głosowych.



PEŁNA WIZUALIZACJA



- Kamera, w której wykorzystano najnowszą technologię wysokiej rozdzielczości.
- Innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie końcówki rurki w drogach

RURKA DOTCHAWICZA

- Niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości.
- Takie same cechy konstrukcyjne jak w naszych rurkach dotchawiczych serii VentiSeal.
- "Efekt akordeonowy" - unikalna harminijkowa konstrukcja rurki pod mankietem umożliwia jej zginanie we wszystkich kierunkach.
- Dwa oka wentylacyjne zastępujące oko Murphy'ego, zwiększające pojemność powietrza.
- Mieka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta.




WYŚWIETLACZE



- Do wyboru wyświetlacze 3,5" lub 8,0".
- Proste, czytelne interfejsy, w których wykorzystano najnowszą technologię ciągłego wyraźnego obrazu pod wszystkimi kątami.
- Akumulator zapewniający ponad 3-godzinną pracę urządzenia
 - wyświetlacz 3,5" do 3 godzin pracy,
 - wyświetlacz 8,0" do 8 godzin pracy.
- Szybkie uruchamianie - wyświetlacz 3,5" uruchamia się natychmiast, wyświetlacz 8,0" - 2-3 sekundy po wciśnięciu przycisku.

WYŚWIETLACZ 8,0"

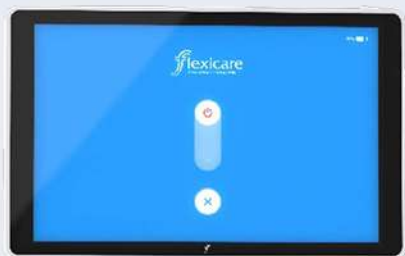

- Z wyświetlacza można korzystać w trakcie ładowania akumulatora.
- Czas pracy akumulatora - do 7 godzin.
- 2-metrowy kabel wzmacniacza umożliwiający ustawienie wyświetlacza w dowolnym miejscu.
- Ładowanie przez mikro USB.

WYŚWIETLACZ 3,5"



- Poliwęglanowa obudowa w technologii unibody. Test upadku do 2 metrów.
- Wodoszczelny IPX4, można czyścić ściereczką nasączoną środkiem na bazie alkoholu lub chloru.
- W komplecie stacja ładowująca i 1-metrowy kabel wzmacniacza umożliwiający ustawienie wyświetlacza w dowolnym miejscu.
- Inteligentna interakcja oparta na ruchu - brak przycisku **Włącz/Wyłącz**.

STACJA INTUBACYJNA

- Regulowana wysokość.
- Przegubowe ramię.
- Zasięg 65 cm.
- Odporna na wielokrotne czyszczenie i zużycie związane z pracą w trybie ciągłym.



AKCESORIA

Stojak stołowy
ProVu



Umożliwia optymalne ustawienie każdego z wyświetlaczy przy pomocy pochylonego pod kątem solidnego uchwyty.

Stacja ładowująca
ProVu



Kompatybilna z wyświetlaczem 3,5", umożliwia korzystanie z wyświetlacza w trakcie ładowania.

Opaska na nadgarstek
ProVu



Idealna w sytuacjach awaryjnych, umożliwia szybkie mocowanie wyświetlacza do nadgarstka.

SPECYFIKACJA

Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
038-990-065	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 6,5	5
038-990-070	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 7,0	5
038-990-075	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 7,5	5
038-990-080	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 8,0	5

Wyświetlacze i akcesoria do mocowania

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
038-990-001	Wyświetlacz 3,5" do wideo sondy ProVu + Stacja ładowania + 1 m kabel wzmacniacza	1
038-990-002	Wyświetlacz 8,0" do wideo sondy ProVu + Stacja ładowania + 2 m kabel wzmacniacza	1
038-990-100	Jednorazowego użytku uchwyt na nadgarstek ProVu do wyświetlacza 3,5"	10
038-990-101	Statyw słupkowy do wyświetlacza ProVu z przegubowym ramieniem	1
038-990-102	Stojak stołowy do wyświetlacza ProVu	1

Ładowarki i kable

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
038-990-011	Kabel przedłużający wzmacniacza ProVu 1 m	1
038-990-012	Kabel przedłużający wzmacniacza ProVu 2 m	1
038-990-013	Kabel ładowarki ProVu z dwoma złączami mikro USB 1,5 m	1
038-990-010	Stacja ładowania ProVu do wyświetlacza 3,5"	1



Jesteśmy polską firmą zajmującą się dystrybucją profesjonalnego sprzętu medycznego. Specjalizujemy się w dostawach **SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO ODDYCHANIE** na rynek szpitalny (oddziały pulmonologii, pediatrii, neonatologii czy OIOM) .

Zespół tworzący firmę **Cedical** posiada wieloletnie doświadczenie na rynku medycznym.



biuro@cedical.com



+48 605 053 561



Cedical Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok. 213A
02-486 Warszawa

NIP: 9522204982 | KRS: 0000834038 | REGON: 385803249

www.cedical.com