

WARD TROLLEY

This modular trolley is used for the daily care of the patient in the room.

WÓZEK WARD

Ten wózek jest używany do codziennej opieki nad pacjentem.

**WARD TROLLEYS. LIGHT MODULAR NURSING TROLLEYS**

Open, modular ward trolleys conforming to Euronorm standards, NL. EN. (60 x 40 cm) or 1/8 EN. (30 x 40 cm). Made from tubular steel pipes (20 x 20 mm) with impact-resistant, UV and solvent-resistant polyester powder coating. A 'BACT-O-STOP®' silver-based additive, which prevents the propagation of all known bacteria, is added to the powder coating, which is also resistant to most chemical products.

Standard heights available are 85, 100, 108 and 113 cm. Includes as standard 4, 5, 6 or 6 pairs of nylon rails. Other combinations possible. The height of the standard fitted polyamide rails adjusts in 25 mm increments to suit your requirements. Load capacity per pair of rails: 30 kg.

Advantages of the rails:

- Low noise operation
- Flexible, the rail is height-adjustable in 25 mm increments.
- Drawer stop
- Slip-resistant trays

WÓZEK WARD. LEKKI MODUŁOWY WÓZEK DLA PIELĘGNIARSTWA

Wózek zrobiony zgodnie z normą Euronorm, NL. 1/4 EN. (60 x 40 cm) or 1/8 EN. (30 x 40 cm). Konstrukcja wózka zrobiona jest z kształtowników stalowych o wymiarach (20 x 20 mm) pomalowana lakierem proszkowym odpornym na korozję, promieniowanie UV oraz środki pielęgnacyjne i dezynfekujące. Do lakieru został dodany środek 'BACT-O-STOP®' zapobiegający rozkwitowi bakterii.

Standardowo dostępne są wysokości 85, 100, 108, 113 cm z odpowiednio 4, 5, 6 parami szyn zaczepowych. Możliwa inna kombinacja.

Obciążalność: 30 kg na 1 parę szyn.

Zalety szyn:


- Ciche
- Elastyczne
- Z zaczepami
- Tace antypoślizgowe

STANDARD WARD TROLLEYS. BASKETS OR CLOSED BASKETS OF 600 X 400 MM

Each trolley had a number of postions to fix the guides. These positions are always at a distance of 25.4 mm. With this chart you can easily calculate how many trays and baskets will fit in the ward trolley. Unused postions will be covered. We advise you to leave the top 2 postions open.


STANDARDOWE WÓZKI WARD. KOSZE ORAZ ZAMKNIĘTE KOSZE O WYMIARACH 600 X 400 MM

Każdy wózek ma określoną liczbę zaczepów do prowadnic koszyków w równej odległości 25,4 mm. Dzięki temu łatwo możesz obliczyć ile i jakich koszy można umieścić w wózku. Radzimy w górnej części pozostawić dwa zaczepy wolne.

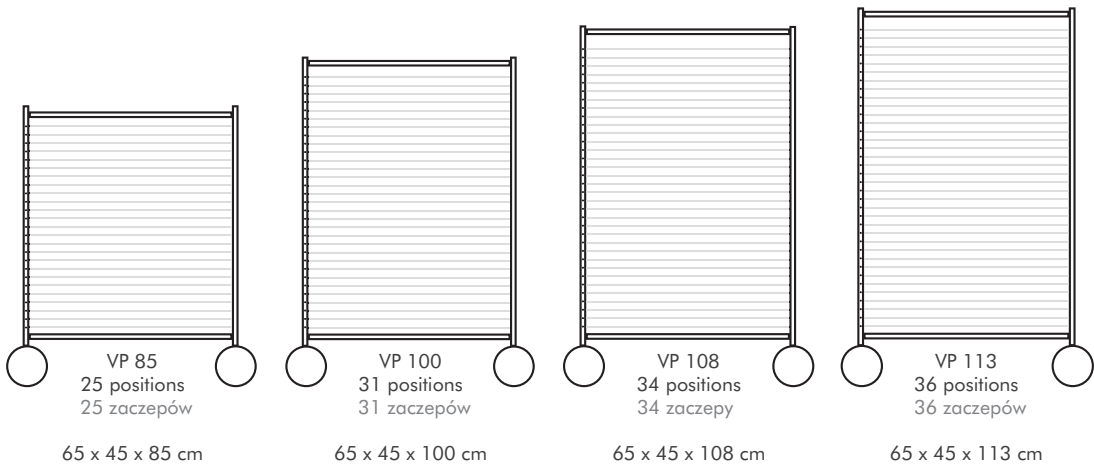

STANDARD WARD TROLLEYS HALF SIZE. BASKETS OR CLOSED BASKETS OF 300 X 400 MM

CHARIOTS DE SOINS STANDARD. KOSZE ORAZ ZAMKNIĘTE KOSZE O WYMIARACH 300 X 400 MM

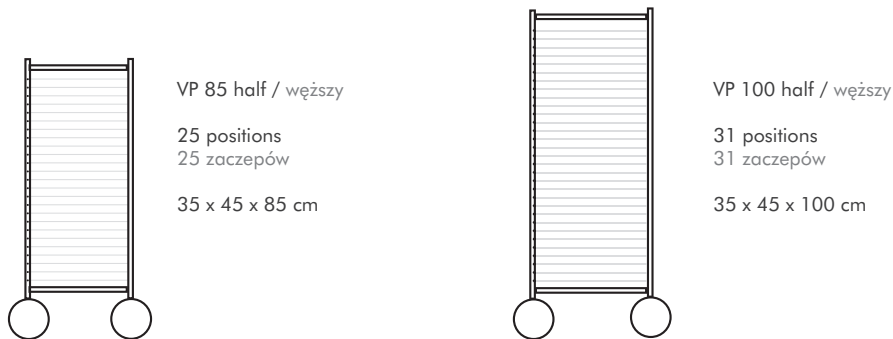

POSSIBLE FILLING

MOŻLIWE MATERIAŁY WYPEŁNIAJĄCE




Basket of 50 mm = 3 positions
Koszyk gł. 50 mm = 3 zaczepy



Basket of 100 mm = 5 positions
Koszyk gł. 100 mm = 5 zaczepów



Basket of 200 mm = 9 positions
Koszyk gł. 200 mm = 9 zaczepów

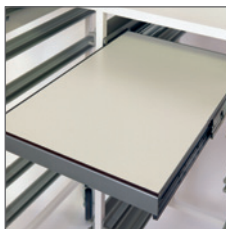

Retractable worktop = 4 positions

This is without any extra space above the surface of the retractable worktop

półka wyciągana = 4 zaczepy

Jest to półka bez wolnej przestrzeni nad nią.



MODULAR WARD TROLLEYS 600 X 400
MODUŁOWY WÓZEK WARD 600 X 400

Article number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
18003 00006*	650 x 450 x 865 mm	85 cm H
18003 00012*	650 x 450 x 1015 mm	100 cm H
18003 00030*	650 x 450 x 1095 mm	108 cm H
18003 00001*	650 x 450 x 1145 mm	113 cm H



CLOSED MODULAR WARD TROLLEYS (3 SIDES) 600 X 400
MODUŁOWY WÓZEK WARD (3 ŚCIANY ZAMKNIĘTE) 600 X 400

Article number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
18003 00110*	650 x 450 x 865 mm	Height 85 cm closed Wysokość 85 cm zamknięty
18003 00077*	650 x 450 x 1015 mm	Height 100 cm closed Wysokość 100 cm zamknięty
18003 00121*	650 x 450 x 1095 mm	Height 108 cm closed Wysokość 108 cm zamknięty
18003 00053*	650 x 450 x 1145 mm	Height 113 cm closed Wysokość 113 cm zamknięty



MODULAR WARD TROLLEYS 300 X 400
MODUŁOWY WÓZEK WARD 300 X 400

Article number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
18003 00008*	350 x 450 x 865 mm	85 cm H
18003 00043*	350 x 450 x 1015 mm	100 cm H



CLOSED MODULAR WARD TROLLEYS (3 SIDES) 300 X 400
MODUŁOWY WÓZEK WARD (3 ŚCIANY ZAMKNIĘTE) 300 X 400

Article number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
18003 00031*	350 x 450 x 865 mm	Height 85 cm closed Wysokość 85 cm zamknięty
18003 00114*	350 x 450 x 1015 mm	Height 100 cm closed Wysokość 100 cm zamknięty

* Guides or worktop not included, these can be found on page 29.

* Szyny i blat roboczy dostępny w opcji – szczegóły na stronie 29.

**STAINLESS STEEL MODULAR WARD TROLLEYS 600 X 400****STAŁOWY MODUŁOWY WÓZEK WARD 600 X 400**

Article number Numer artykułu	Dimensions (WxDxH) Wymiary (SxGxW)	Description Opis
18004 00005	650 x 450 x 865 mm	85 cm H
18004 00006	650 x 450 x 1015 mm	100 cm H
18004 00007	650 x 450 x 1095 mm	108 cm H
18004 00008	650 x 450 x 1145 mm	113 cm H

**STAINLESS STEEL CONNECTING UNIT FOR PC BASKET OF 300 X 400****UCHWYT NA KOSZYK PC 300 X 400**

Article number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)
18004 00001	300 x 400 mm